

# سیفتی باکس های دایره ای شکل

ارتفاع: ۱۳/۵ سانتی متر

قطر: ۱۴/۵ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۱۸۰ عدد



1.5 Litres

ارتفاع: ۱۸ سانتی متر

قطر: ۱۸ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۸۱ عدد



3 Litres

ارتفاع: ۲۴ سانتی متر

قطر: ۱۸ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۳۶ عدد



5 Litres

ارتفاع: ۱۷/۵ سانتی متر

قطر: ۲۵ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۴۰ عدد



7 Litres

ارتفاع: ۲۹ سانتی متر

قطر: ۲۵ سانتی متر


تعداد در کارتن: ۳۲ عدد





## درب و هولدر ها

شیار های تعبیه شده روی دهانه این امکان را برای مصرف کننده فراهم می کند که با دست و بدون آلوده شدن دست دیگر بتواند قطعه آلوده را داخل سیفتی باکس قرار دهد. فضای دهانه سیفتی باکس به گونه ای طراحی شده تا جهت انداختن هرگونه شیء آلوده را امکان پذیر کند. قسمت دندانان ای دارای دوام و استحکام کافی است تا بتواند در مقابل فشار کننده شدن نیدل ها مقاومت کند.

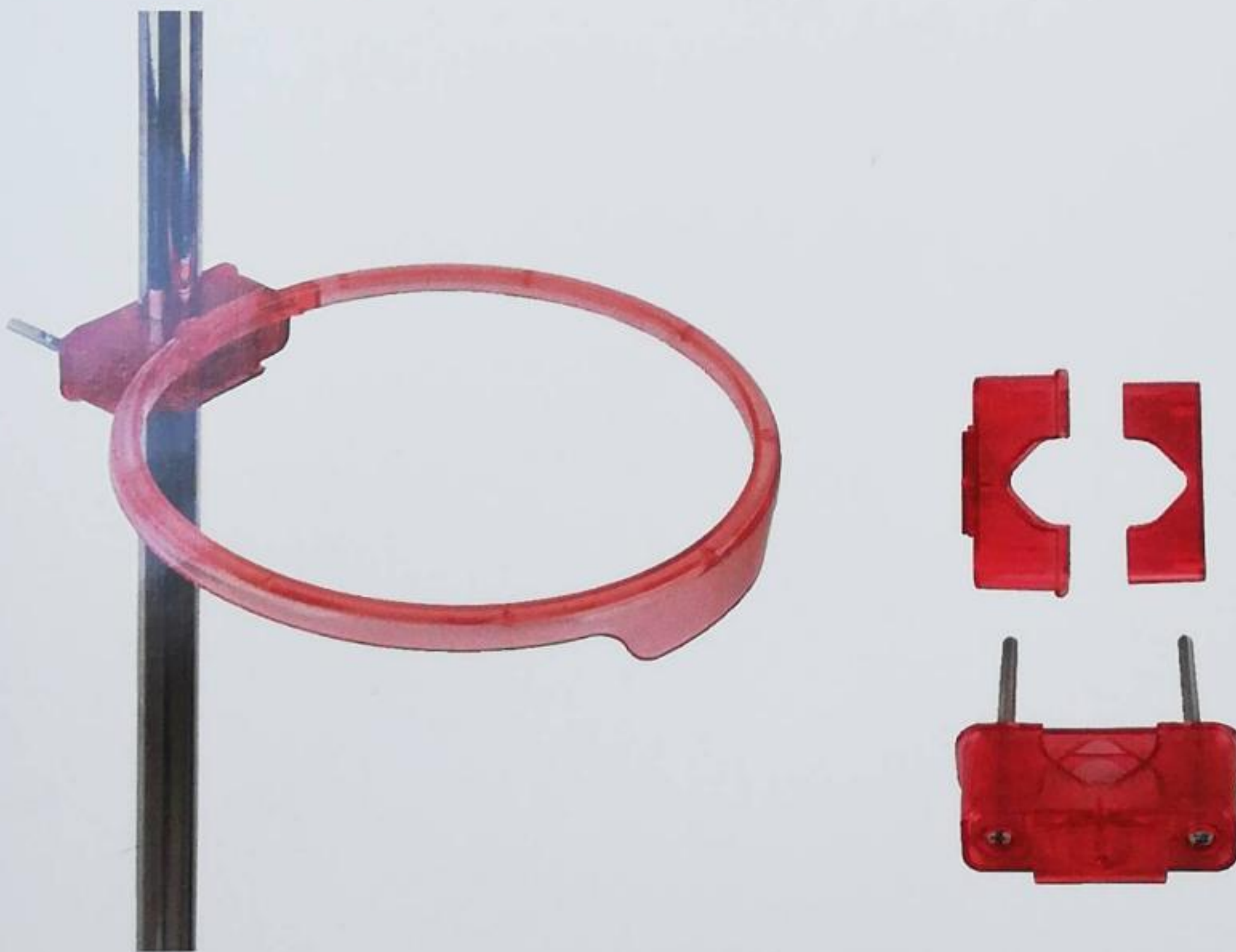

### هولدرهای شرکت بهار زیست نشکن می باشند.

هولدرها به گونه ای طراحی و ساخته شده اند که جهت استفاده از هر کدام از حجم ها محدودیتی ندارند. یک پایه هولدر که روی توالی یا دیوار نصب می شود، امکان استفاده هر کدام از حجم ها را میسر می سازد.





## سیفتی باکس های صادراتی (مربعی)

ارتفاع: ۱۲ سانتی متر  
عرض: ۹/۵ سانتی متر  
تعداد در کارتن: ۶۴ عدد



ارتفاع: ۲۰/۵ سانتی متر  
عرض: ۹/۵ سانتی متر  
تعداد در کارتن: ۵۶ عدد



ارتفاع: ۳۳/۵ سانتی متر  
عرض: ۹/۵ سانتی متر  
تعداد در کارتن: ۴۰ عدد



دریهای این نوع سیفتی باکس علاوه بر داشتن محل مخصوص جهت سرنگهای خاص پزشکی به دلیل طراحی منحصر به فرد دارای زبانه ای برای باز و بسته شدن دائم است

### هولدرهای شرکت بهار زیست نشکن می باشند.

در خصوص هولدرها قطعه ای طراحی شده که به راحتی با دو عدد پیچ به روی هر دیواری متصل میشود. مواد بکار رفته در ساختن هولدرها به گونه ایست که هم قطعه متصل به دیوار و هم قطعه دایره ای شکل جهت بالا بردن ایمنی مصرف کنندگان میتوانند وزن های بالایی را تحمل کنند





# استاندارد سیفتی باکس چیست؟

سیفتی باکس جزو عوامل مؤثر و مهم جمع آوری پسماند عفونی در بیمارستان ها می باشد. این کالا دارای استانداردهای خاصی است که به تفصیل توسط کارشناسان شرکت جهت مصرف کنندگان تشریح می گردد. در اینجا به چند عامل بسیار ضروری در خصوص استاندارد این کالا اشاره می کنیم:

- ۱- ضخامت سیفتی باکس می بایستی به اندازه ای باشد که حتی سر سوزن های بزرگ در صورت فشار ناشی از انباشته شدن نتواند جدار آن را سوراخ کند.
- ۲- درب سیفتی باکس علاوه بر اینکه می بایستی به راحتی از روی سیفتی باکس جدا نشود حتما نباید اجازه خروج هرگونه مایع را از سیفتی باکس بدهد چنانچه سیفتی باکس آب بند نباشد علاوه بر ریسک بالا جهت استفاده ممکن است در صورت واژگونی خسارت بسیار جبران ناپذیری از بابت انتشار عوامل عفونی داشته باشد
- ۳- قابل اتوکلاو بودن حتما می بایست سیفتی باکس از مواد درجه ۱ و با استاندارد پزشکی ساخته شود چرا که در هنگام استریل نمودن و یا سوزاندن که جهت دفع بهداشتی سیفتی باکس ضروری است مقاوم بوده و به دستگاههای مورد نظر آسیب نرساند.

**DO NOT PUT LOOSE SHARPS IN THE TRASH**

**7 BILLION SHARPS ARE DISCARDED IN THE TRASH EVERY YEAR.**

Up to 850,000 people are injured every year by sharps that are not discarded properly. Used sharps can cut people, infect them and spread disease.

**USE A SHARPS CONTAINER**

These are sharps

Syringes, Needle connectors, Lancets, Needles, Auto Injectors, Infusion sets

**WARNING**

Needle stick injury can expose you to infectious diseases such as Hepatitis and HIV.

TO AVOID INJURY...

Do not force sharps into container, Do not put fingers inside container, Do not remove needle, Do not bend or break needle, Do not recap needle

**KEEP YOUR COMMUNITY SAFE**

DO NOT throw loose sharps in trash, DO NOT put sharps in recycling, DO NOT flush sharps down toilet, KEEP OUT of reach of children

**GET A SHARPS CONTAINER**

FREE sharps containers may be available from your doctor, hospital, health insurance or medication supplier. You can also buy a sharps container from your pharmacist or online.

Portable travel containers, Sharps container with vertical drop slot, Sharps container with horizontal drop slot

For information about rules and laws in your community, contact the Coalition for Safe Community Needle Disposal at 800-643-7643. For more information on sharps visit [www.sharpsdisposal.gov](http://www.sharpsdisposal.gov)

